


SCHEDA TECNICA

QT00892 Sistema GaSampler™. Kit per Paziente Singolo

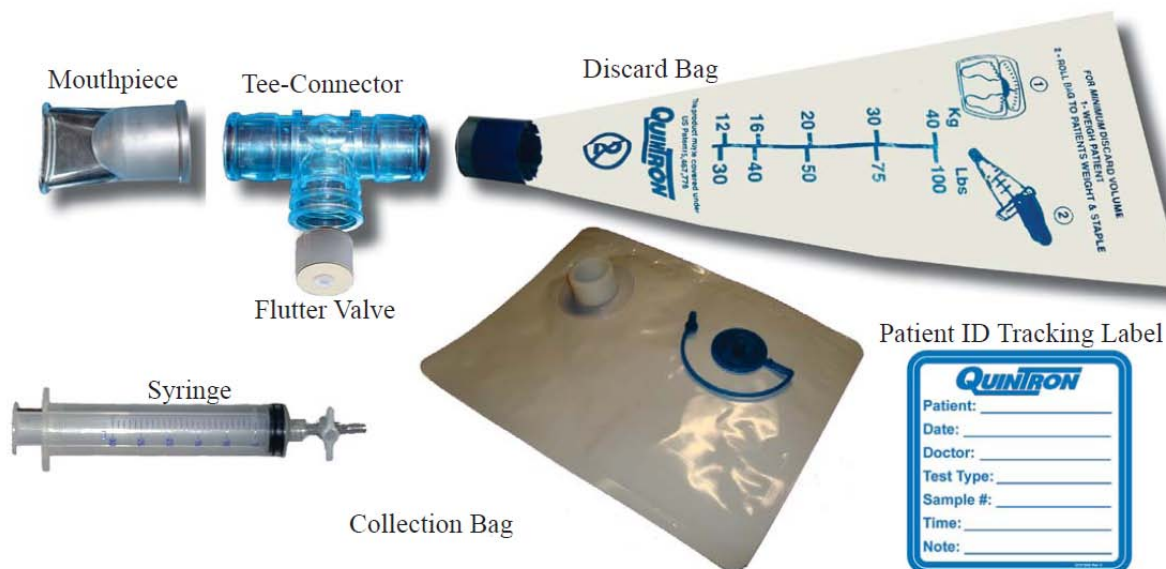

Il GaSampler Kit per singolo paziente è un sistema monouso per la raccolta dell'espriato alveolare di un singolo paziente durante tutto l'arco di tempo dell'analisi. Dopo ciascuna raccolta di espriato il campione da 20 ml o maggiore può essere raccolto in una siringa con rubinetto di chiusura ed analizzato immediatamente, o in più siringhe munite di rubinetto ed analizzato entro le 2 ore successive al prelievo.

Il sistema può essere usato da personale non tecnico o dai pazienti stessi con una minima supervisione o anche senza, dopo che è stato montato e spiegato il funzionamento e la procedura da seguire.

Ciascun kit contiene tutti i componenti necessari alla corretta raccolta dei campioni di espriato da un singolo paziente durante l'intero test ma senza la dose del substrato (lo zucchero da analizzare).

Il campione viene rimosso dalla busta di raccolta che viene, quindi, appiattita per rimuovere l'eccesso di espriato prima di raccogliere il campione successivo.

Nel kit è inclusa una etichetta sulla quale possono essere registrati i dati del paziente in modo da assicurare che i componenti del kit siano tutti assegnati ad uno specifico paziente quando il test viene eseguito per più di un paziente.

L'uso di questo kit per un singolo paziente elimina la possibilità di contaminazione incrociata tra pazienti e permette di risparmiare tempo e denaro in relazione con i costi di lavaggio, pulizia e decontaminazione dei componenti riutilizzabili.

Il QT00892 Sistema GaSampler™ Kit per Paziente Singolo è un accessorio ad uso esclusivo con gli analizzatori automatici di H₂ QuinTron BreathTracker ed è classificato come dispositivo diverso da quelli di cui all'Allegato II della Direttiva 98/79/CE Dispositivi Diagnostici in Vitro (aggiornata dalla Direttiva 2007/47/CE) e ne rispetta totalmente le disposizioni.

Il codice CND attribuito è W0299.